

# Drug-Screen Tests

Tests rapides de dépistage de stupéfiants



Tests rapides pour la détection de drogues et de leurs métabolites dans l'urine et la salive

## nal von minden - Votre partenaire dans le domaine des dépistages rapides

- ✓ Résultats fiables et rapides, en 1 à 5 minutes
- ✓ Manipulation facile et lecture simple
- ✓ Produits de haute qualité - Haute conformité avec la méthode de référence GC/MS
- ✓ Seuils de détection fixés selon le standard international de la SAMHSA/NIDA
- ✓ Certification CE de tous nos produits et enregistrement auprès de la FDA
- ✓ Production selon les recommandations GMP, d'après ISO 9001:2000 et 13485:2003
- ✓ 10 années d'expertise dans le dépistage de stupéfiants

## nal von minden - Le spécialiste des dépistages de stupéfiants

Bandelettes unitaires	page 2
Tube de 25 bandelettes	page 4
Tests anti-adultération	page 4
Multi-carte	page 5
Cassettes unitaires	page 6
Multi-cassette	page 8
Aperçu des drogues et médicaments	page 9
Tests salivaires	page 10
Bon de commande	page 12


## N'hésitez pas à nous poser vos questions sur nos autres tests:

- Test rapide HIV sérum
- Test intégré - Urine Cup Integra
- Lucio drogues Elisa
- Test rapide tétanos - sang -sérum - plasma



## Bandelettes unitaires :

- ✓ Emballage individuel
- ✓ Résultats après 1-5 minutes
- ✓ Résultats fiables à 99%
- ✓ Durée de péremption des tests : 18 Mois
- ✓ Certification CE

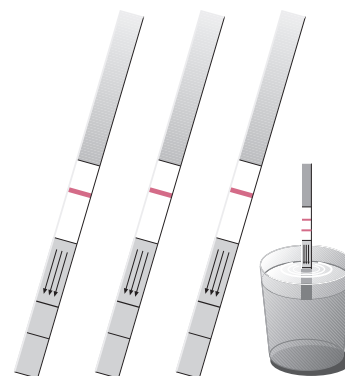

## Informations sur nos bandelettes unitaires

Produit	Paramètre	Cut-off (ng/ml)	Conditionnement	Référence	Prix/Test HT
<b>Amphétamine</b>	AMP	1000 ng/ml	50 Bandelettes	101001	1,69 €
<b>AMP300</b>	AMP300	300 ng/ml	50 Bandelettes	101016	1,69 €
<b>AMP500</b>	AMP500	500 ng/ml	50 Bandelettes	101022	1,69 €
<b>Barbituriques</b>	BAR	300 ng/ml	50 Bandelettes	101002	1,69 €
<b>Benzodiazépines</b>	BZD	300 ng/ml	50 Bandelettes	101003	1,69 €
<b>BZD100</b>	BZD	100 ng/ml	50 Bandelettes	101031	1,69 €
<b>BZD200</b>	BZD	200 ng/ml	50 Bandelettes	101025	1,69 €
<b>Buprénorphine</b>	BUP	10 ng/ml	50 Bandelettes	101004	1,69 €
<b>Cannabinoïde</b>	THC	50 ng/ml	50 Bandelettes	101012	1,69 €
<b>THC25</b>	THC25	25 ng/ml	50 Bandelettes	101017	1,69 €
<b>THC150</b>	THC150	150 ng/ml	50 Bandelettes	101023	1,69 €
<b>Cotinine</b>	COT	200 ng/ml	50 Bandelettes	101019	1,69 €
<b>EDDP</b>	EDDP	100 ng/ml	50 Bandelettes	101021	1,69 €
<b>Fentanyl NOUVEAU!</b>	FYL	10 ng/ml	50 Bandelettes	101029	1,89 €
<b>Kétamine NOUVEAU!</b>	KET	1000 ng/ml	50 Bandelettes	101024	1,69 €
<b>Cocaïne</b>	COC	300 ng/ml	50 Bandelettes	101005	1,69 €
<b>COC100</b>	COC100	100 ng/ml	50 Bandelettes	101026	1,69 €
<b>MDA</b>	MDA	500 ng/ml	50 Bandelettes	101015	1,69 €
<b>MDMA/XTC</b>	MDMA	500 ng/ml	50 Bandelettes	101008	1,69 €
<b>Méthadone</b>	MTD	300 ng/ml	50 Bandelettes	101006	1,69 €
<b>Méthamphétamine</b>	MET	1000 ng/ml	50 Bandelettes	101007	1,69 €
<b>MET300</b>	MET300	300 ng/ml	50 Bandelettes	101018	1,69 €
<b>MET500</b>	MET500	500 ng/ml	50 Bandelettes	101020	1,69 €
<b>Méthaqualone NOUVEAU!</b>	MQL	300 ng/ml	50 Bandelettes	101030	1,69 €
<b>Morphine/Opiacés</b>	MOR	300 ng/ml	50 Bandelettes	101009	1,69 €
<b>MOR100</b>	MOR100	100 ng/ml	50 Bandelettes	101027	1,69 €
<b>MOR2000</b>	MOR2000	2000 ng/ml	50 Bandelettes	101010	1,69 €
<b>Oxycodon NOUVEAU!</b>	OXY	100 ng/ml	50 Bandelettes	101032	1,69 €
<b>Paracétamol NOUVEAU!</b>	PCM	5000 ng/ml	50 Bandelettes	101034	1,69 €
<b>Phencyclidine</b>	PCP	25 ng/ml	50 Bandelettes	101011	1,69 €
<b>Propoxyphène</b>	PPX	300 ng/ml	50 Bandelettes	101014	1,69 €
<b>Tramadol NOUVEAU!</b>	TRA	100 ng/ml	50 Bandelettes	101028	1,69 €
<b>Antidépresseur tricy.</b>	TCA	1000 ng/ml	50 Bandelettes	101013	1,69 €
<b>Alcosens - Salive</b>	ALC	0,2‰, 0,5‰, 3‰	50 Bandelettes	360001	2,49 €
<b>Alcosens - Haleine</b>	ALC	0,2‰, 0,5‰	25 Tubes	360010	2,49 €

## Longue conservation

Les tests peuvent être conservés dans leur emballage hermétique protecteur à température ambiante (2 à 30°C) pendant 18 mois.


## Livraison rapide

Commandez avant 14 h et votre commande sera envoyée le jour même. Livraison sous 2 à 5 jours ouvrés.


## Mode d'emploi : Bandelette unitaire

### 1. Matériel nécessaire à l'emploi :

- Bandelette unitaire
- Récipient
- Gants
- Echantillon d'urine

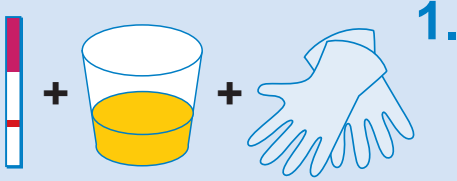


2. Sortir la bandelette et la plonger **15-30 secondes jusqu'à ce que la zone de lecture se colore entièrement d'un jaune pâle**. Veiller à ne pas immerger au-delà de la ligne rouge.

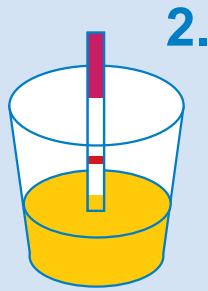

3. Poser la bandelette sur une surface propre et plane.


4. Lire le résultat après **1-5 minutes**. Ne plus interpréter les résultats après 10 minutes.

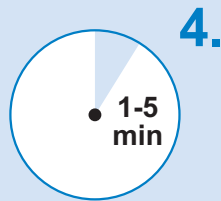


## Mode d'emploi : Multi-Carte

### 1. Matériel nécessaire à l'emploi :

- Bandelette unitaire
- Récipient
- Echantillon d'urine
- Gants

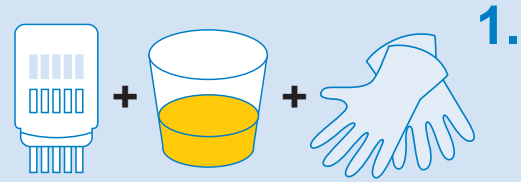

2. Sortir la multi-carte, enlever le couvercle et plonger la carte **15-30 secondes jusqu'à ce que les zones de lecture se colorent entièrement d'un jaune pâle**. Le support de la multi-carte ne doit pas entrer en contact avec l'urine. Remettre le couvercle.

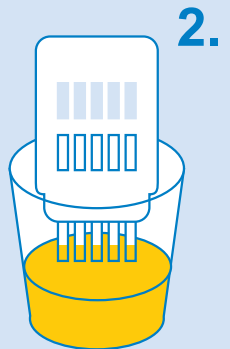

3. Poser la multi-carte sur une surface propre et plane.


4. Lire le résultat après **1-5 minutes**. Ne plus interpréter les résultats après 10 minutes.



## Interprétation des résultats

### Négatif :

Deux lignes rouges apparaissent dans la fenêtre de lecture. L'une représente la ligne de contrôle (C) et l'autre la ligne de test (T) pour toute drogue spécifique. Ce résultat négatif indique que la quantité de drogue présente dans cet échantillon est inférieure au seuil de détection, voire totalement absente. L'intensité de la ligne de test peut varier.

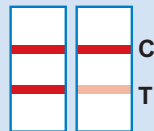


### Positif :

Seule une ligne rouge de contrôle (C) apparaît et aucune ligne de test (T) n'apparaît.



### Non valide :

Aucune ligne de contrôle (C) n'apparaît.

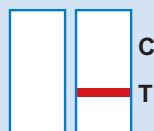

## Interprétation des résultats


### Négatif :

Deux lignes rouges apparaissent dans la fenêtre de lecture. L'une représente la ligne de contrôle (C) et l'autre la ligne de test (T) pour toute drogue spécifique. Ce résultat négatif indique que la quantité de drogue présente dans cet échantillon est inférieure au seuil de détection, voire totalement absente. L'intensité de la ligne de test peut varier.



### Positif :

Seule une ligne rouge de contrôle (C) apparaît et aucune ligne de test (T) n'apparaît.

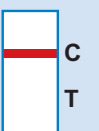

### Non valide :

Aucune ligne de contrôle (C) n'apparaît.



## Bandelettes : Tube de 25 bandelettes

- ✓ Tube contenant 25 bandelettes
- ✓ Résultats après 1-5 minutes
- ✓ Résultats fiables à 99%
- ✓ Durée de péremption des tests : 18 Mois
- ✓ Certification CE




## Informations Bandelettes : Tube de 25 bandelettes

Produit	Paramètre	Cut-off (ng/ml)	Conditionnement	Référence	Prix/Tube HT
<b>Amphétamine</b>	AMP	1000 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620015	42,25 €
<b>AMP300</b>	AMP300	300 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620006	42,25 €
<b>AMP500</b>	AMP500	500 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620013	42,25 €
<b>Barbituriques</b>	BAR	300 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620085	42,25 €
<b>Benzodiazépines</b>	BZD	300 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620065	42,25 €
<b>BZD100</b>	BZD	100 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	105031	42,25 €
<b>BZD200</b>	BZD	200 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620063	42,25 €
<b>Buprénorphine</b>	BUP	10 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620150	42,25 €
<b>Cannabinoïde</b>	THC	50 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620055	42,25 €
<b>THC25</b>	THC25	25 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620054	42,25 €
<b>THC150</b>	THC150	150 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620057	42,25 €
<b>Cotinine</b>	COT	200 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620193	42,25 €
<b>EDDP</b>	EDDP	100 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620160	42,25 €
<b>Fentanyl NOUVEAU!</b>	FYL	10 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620190	47,25 €
<b>Kétamine NOUVEAU!</b>	KET	1000 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620195	42,25 €
<b>Cocaïne</b>	COC	300 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620045	42,25 €
<b>COC100</b>	COC100	100 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620043	42,25 €
<b>MDA</b>	MDA	500 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620103	42,25 €
<b>MDMA/XTC</b>	MDMA	500 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620105	42,25 €
<b>Méthadone</b>	MTD	300 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620075	42,25 €
<b>Méthamphétamine</b>	MET	1000 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620025	42,25 €
<b>MET300</b>	MET300	300 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620007	42,25 €
<b>MET500</b>	MET500	500 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620023	42,25 €
<b>Méthaqualone NOUVEAU!</b>	MQL	300 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	105030	42,25 €
<b>Morphine/Opiacés</b>	MOR	300 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620035	42,25 €
<b>MOR100</b>	MOR100	100 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620033	42,25 €
<b>MOR2000</b>	MOR2000	2000 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620037	42,25 €
<b>Oxycodon NOUVEAU!</b>	OXY	100 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	105032	42,25 €
<b>Paracétamol NOUVEAU!</b>	PCM	5000 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	105034	42,25 €
<b>Phencyclidine</b>	PCP	25 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620108	42,25 €
<b>Propoxyphène</b>	PPX	300 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620197	42,25 €
<b>Tramadol NOUVEAU!</b>	TRA	100 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620170	42,25 €
<b>Antidépresseur tricy.</b>	TCA	1000 ng/ml	Tube de 25 Bandelettes	620095	42,25 €

## Protection contre falsification

Produit	Description	Référence	Prix /Test H.T
<b>Thermomètre</b>	32°C - 37°C	124001	0,10 €
<b>Bandelette Contrôle-urine-7</b>	Créatinine, Nitrite, Glutaraldéhyde, pH, Densité, Anti-Oxydant, Chlorochromate de Pyridinium	630925	0,78 €

## Construction d'un test multi-carte

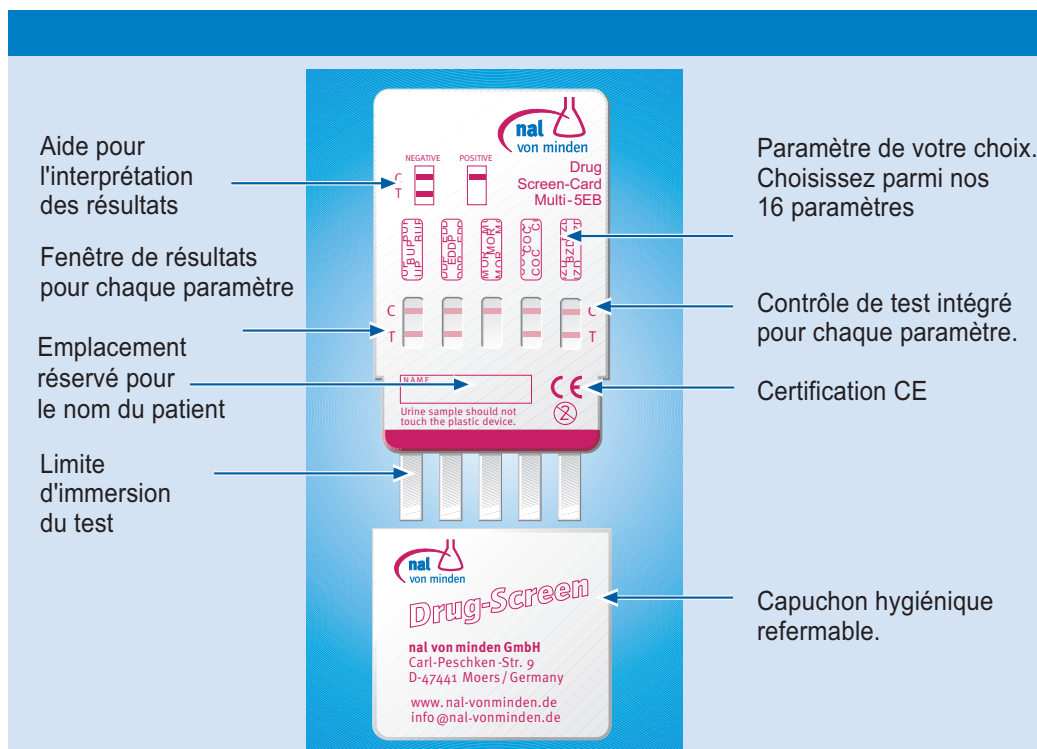

### Gratuit : Béchers et gants

Pour tous les Multi-tests : béchers et gants gratuits.

### Votre test personnalisé

A partir d'une quantité minimum de 100 unités, créez sans surcoût votre test personnalisé avec les paramètres choisis.

### Conditionnement

Nos multi-tests sont disponibles en coffret de 25 tests,

### Garantie d'échange


Dans le cas où vos tests auraient dépassé la date de péremption, nous échangeons vos tests périmés contre des nouveaux.

## Informations sur nos tests multi-carte

Produit	Paramètre	Référence	Prix/Test HT
<b>Drug-Screen-Multi 3D</b>	BZD, MOR/OPI, MTD	103033	5,89 €
<b>Drug-Screen-Multi 3K</b>	COC, MOR/OPI, MTD	103034	5,89 €
<b>Drug-Screen-Multi 4V</b>	AMP, COC, MOR/OPI, THC	630002	7,29 €
<b>Drug-Screen-Multi 4G</b>	BZD, COC, MOR/OPI, THC	103041	7,29 €
<b>Drug-Screen-Multi 4M</b>	BZD, COC, MOR/OPI, MTD	630402	7,29 €
<b>Drug-Screen-Multi 5</b>	AMP, BZD, COC, MOR/OPI, THC	620402	8,39 €
<b>Drug-Screen-Multi 5M</b>	AMP, BZD, COC, MOR/OPI, MTD	620302	8,39 €
<b>Drug-Screen-Multi 5S</b>	BZD, COC, MOR/OPI, MTD, THC	630602	8,39 €
<b>Drug-Screen-Multi 5B</b>	AMP, BUP, BZD, COC, MOR/OPI	621202	8,39 €
<b>Drug-Screen-Multi 5E</b>	AMP, BZD, COC, EDDP, MOR/OPI	621702	8,39 €
<b>Drug-Screen-Multi 6</b>	AMP, BZD, COC, MOR/OPI, MTD, THC	620602	9,99 €
<b>Drug-Screen-Multi 6B</b>	AMP, BZD, COC, MET, MOR/OPI, THC	640402	9,99 €
<b>Drug-Screen-Multi 6L</b>	AMP, BUP, BZD, COC, MOR/OPI, MTD	103062	9,99 €
<b>Drug-Screen-Multi 6D</b>	AMP, COC, MDMA/XTC, MET, MOR/OPI, THC	103064	9,99 €
<b>Drug-Screen-Multi 6E</b>	AMP, BZD, COC, EDDP, MOR/OPI, THC	622402	9,99 €
<b>Drug-Screen-Multi 7A</b>	AMP, BZD, COC, MET, MOR/OPI, MTD, THC	103070	11,69 €
<b>Drug-Screen-Multi 7B</b>	AMP, BUP, BZD, COC, MOR/OPI, MTD, THC	103071	11,69 €
<b>Drug-Screen-Multi 8B</b>	AMP, BUP, BZD, COC, MDMA/XTC, MOR/OPI, MTD, THC	103081	13,39 €
<b>Drug-Screen-Multi 8C</b>	AMP, BUP, BZD, COC, MET, MOR/OPI, MTD, THC	103082	13,39 €
<b>Drug-Screen-Multi 10E</b>	AMP, BAR, BZD, COC, MDMA, MET, MOR/OPI, MTD, TCA, THC	620802	16,69 €
<b>Drug-Screen-Multi 10B</b>	AMP, BAR, BUP, BZD, COC, MET, MOR/OPI, MTD, TCA, THC	103103	16,69 €
<b>Drug-Screen-Multi 10D</b>	AMP, BAR, BUP, BZD, COC, MDMA/XTC, MOR/OPI, MTD, TCA, THC	103106	16,69 €
<b>Drug-Screen-Multi X</b>	Avec les paramètres de votre choix		Sans surcoût

## Cassettes unitaires

- ✓ Emballage individuel
- ✓ Résultats après 1-5 minutes
- ✓ Résultats fiables à 99%
- ✓ Durée de péremption des tests : 18 Mois
- ✓ Certification CE

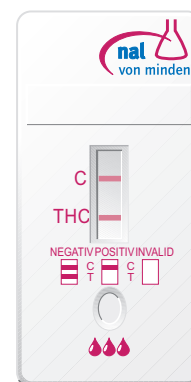

## Informations sur nos cassettes unitaires

Produit	Paramètre	Cut-off (ng/ml)	Conditionnement	Référence	Prix/ Test HT
<b>Amphétamine</b>	AMP	1000 ng/ml	30 Cassettes	102001	1,99 €
<b>AMP300</b>	AMP300	300 ng/ml	30 Cassettes	102016	1,99 €
<b>AMP500</b>	AMP500	500 ng/ml	30 Cassettes	102022	1,99 €
<b>Barbituriques</b>	BAR	300 ng/ml	30 Cassettes	102002	1,99 €
<b>Benzodiazépines</b>	BZD	300 ng/ml	30 Cassettes	102003	1,99 €
<b>BZD100</b>	BZD	100 ng/ml	30 Cassettes	102031	1,99 €
<b>BZD200</b>	BZD	200 ng/ml	30 Cassettes	102025	1,99 €
<b>Buprénorphine</b>	BUP	10 ng/ml	30 Cassettes	102004	1,99 €
<b>Cannabinoïde</b>	THC	50 ng/ml	30 Cassettes	102012	1,99 €
<b>THC25</b>	THC25	25 ng/ml	30 Cassettes	102017	1,99 €
<b>THC150</b>	THC150	150 ng/ml	30 Cassettes	102023	1,99 €
<b>Cotinine</b>	COT	200 ng/ml	30 Cassettes	102019	1,99 €
<b>EDDP</b>	EDDP	100 ng/ml	30 Cassettes	102021	1,99 €
<b>Fentanyl NOUVEAU!</b>	FYL	10 ng/ml	30 Cassettes	102029	2,19 €
<b>Kétamine NOUVEAU!</b>	KET	1000 ng/ml	30 Cassettes	102024	1,99 €
<b>Cocaïne</b>	COC	300 ng/ml	30 Cassettes	102005	1,99 €
<b>COC100</b>	COC100	100 ng/ml	30 Cassettes	102026	1,99 €
<b>MDA</b>	MDA	500 ng/ml	30 Cassettes	102015	1,99 €
<b>MDMA/XTC</b>	MDMA	500 ng/ml	30 Cassettes	102008	1,99 €
<b>Méthadone</b>	MTD	300 ng/ml	30 Cassettes	102006	1,99 €
<b>Méthamphétamine</b>	MET	1000 ng/ml	30 Cassettes	102007	1,99 €
<b>MET300</b>	MET300	300 ng/ml	30 Cassettes	102018	1,99 €
<b>MET500</b>	MET500	500 ng/ml	30 Cassettes	102020	1,99 €
<b>Méthaqualone NOUVEAU!</b>	MQL	300 ng/ml	30 Cassettes	102030	1,99 €
<b>Morphine/Opiacés</b>	MOR	300 ng/ml	30 Cassettes	102009	1,99 €
<b>MOR100</b>	MOR100	100 ng/ml	30 Cassettes	102027	1,99 €
<b>MOR2000</b>	MOR2000	2000 ng/ml	30 Cassettes	102010	1,99 €
<b>Oxycodon NOUVEAU!</b>	OXY	100 ng/ml	30 Cassettes	102032	1,99 €
<b>Paracétamol NOUVEAU!</b>	PCM	5000 ng/ml	30 Cassettes	102034	1,99 €
<b>Phencyclidine</b>	PCP	25 ng/ml	30 Cassettes	102011	1,99 €
<b>Propoxyphène</b>	PPX	300 ng/ml	30 Cassettes	102014	1,99 €
<b>Tramadol NOUVEAU!</b>	TRA	100 ng/ml	30 Cassettes	102028	1,99 €
<b>Antidépresseur tricy.</b>	TCA	1000 ng/ml	30 Cassettes	102013	1,99 €

## Garantie d'échange

Dans le cas où vos tests auraient dépassé la date de péremption, nous échangeons vos tests périmés contre des nouveaux.


## Service laboratoire

En cas de résultats équivoques, nous faisons analyser vos échantillons d'urine à nos frais par un laboratoire partenaire, lequel effectuera une analyse GC-MS pour toute clarté.

## Mode d'emploi - Cassette unitaire


### 1. Matériel nécessaire à l'emploi :

- Cassette unitaire
- Pipette
- Récipient
- Gants
- Echantillon d'urine

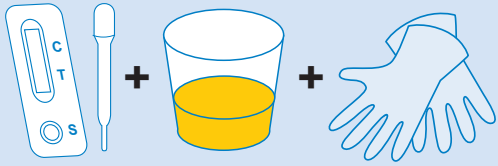


1.

2. Sortir la cassette et la poser sur une surface propre et plane. A l'aide de la pipette déposer 3 gouttes d'urine (env. 180 µl) dans l'ouverture (S) de la cassette.

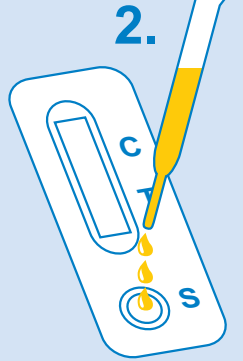

2.

3. Lire le résultat après 1-5 minutes. Ne plus interpréter les résultats après 10 minutes.

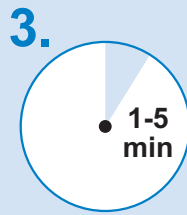


3.

Vous trouverez une description détaillée dans le mode d'emploi.

## Mode d'emploi - Multi-Cassette


### 1. Matériel nécessaire à l'emploi :

- Multi-Cassette
- Pipette
- Récipient
- Gants
- Echantillon d'urine

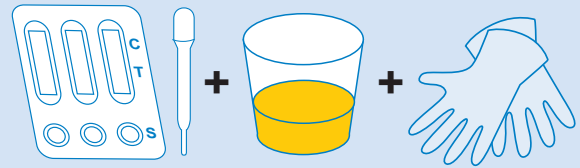


1.

2. Sortir la cassette et la poser sur une surface propre et plane. A l'aide de la pipette déposer 3 gouttes d'urine (env. 180 µl) dans l'ouverture (S) de la cassette.

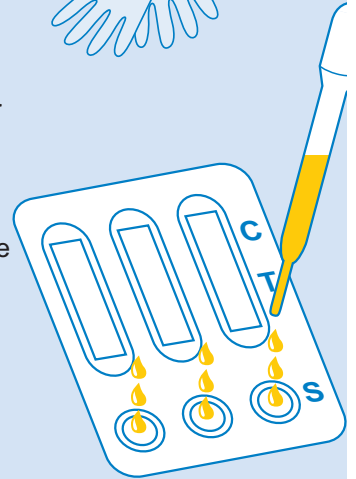

3. Attendre l'apparition du résultat après 1-5 minutes. Ne plus interpréter les résultats après 10 minutes.

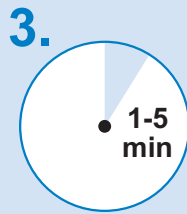


3.

Vous trouverez une description détaillée dans le mode d'emploi.

## Interprétation des résultats

### Négatif :

Deux lignes rouges apparaissent dans la fenêtre de lecture. L'une représente la ligne de contrôle (C) et l'autre la ligne de test (T) pour toute drogue spécifique. Ce résultat négatif indique que la quantité de drogue présente dans cet échantillon est inférieure au seuil de détection, voire totalement absente. L'intensité de la ligne de test peut varier.

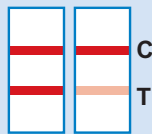

### Positif :

Seule une ligne rouge de contrôle (C) apparaît et aucune ligne de test (T) n'apparaît.



### Non valide :


Aucune ligne de contrôle (C) n'apparaît.



## Interprétation des résultats


### Négatif :

Deux lignes rouges apparaissent dans la fenêtre de lecture. L'une représente la ligne de contrôle (C) et l'autre la ligne de test (T) pour toute drogue spécifique. Ce résultat négatif indique que la quantité de drogue présente dans cet échantillon est inférieure au seuil de détection, voire totalement absente. L'intensité de la ligne de test peut varier.

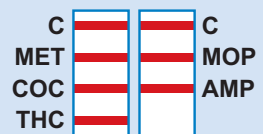


### Positif :

Seule une ligne rouge de contrôle (C) apparaît et aucune ligne de test (T) n'apparaît.

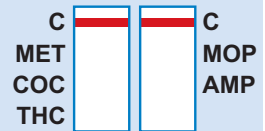


### Positif seulement pour COC :

Dans cet exemple, seul le paramètre COC est positif.

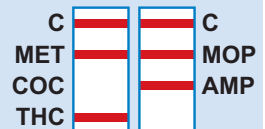


### Non valide:

Aucune ligne de contrôle (C) n'apparaît.

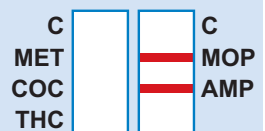

## Construction d'un test multi-cassette

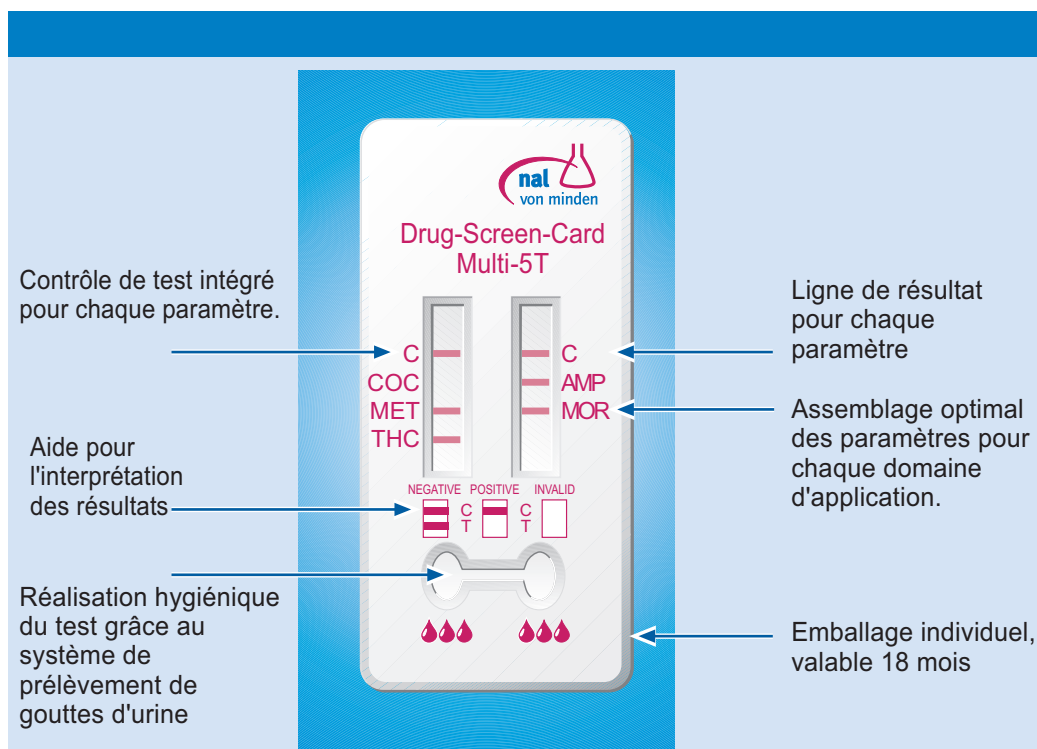

### Gratuit : Béchers et gants

Pour tous les Multi-tests : béchers et gants gratuits.

### Votre test personnalisé

A partir d'une quantité minimum de 100 unités, créez sans surcoût votre test personnalisé avec les paramètres choisis.

### Conditionnement

Nos multi-tests sont disponibles en coffret de 25 tests.

### Garantie d'échange

Dans le cas où vos tests Drug-Screen (urinaire) auraient dépassé la date de péremption, nous échangeons vos tests périmés contre des nouveaux.

## Informations sur nos tests multi-cassette


Produit	Paramètre	Référence	Prix/Test HT
<b>Drug-Screen-Multi 3TC</b>	BAR, BZO, TCA	104032	5,89 €
<b>Drug-Screen-Multi 3TD</b>	COC, MOR/OPI, THC	104033	5,89 €
<b>Drug-Screen-Multi 4TD</b>	AMP, COC, MOR/OPI, THC	104040	7,29 €
<b>Drug-Screen-Multi 4T</b>	BZO, COC, MOR/OPI, THC	630302	7,29 €
<b>Drug-Screen-Multi 4TA</b>	BZO, COC, MOR/OPI, MTD	104044	7,29 €
<b>Drug-Screen-Multi 5TD</b>	AMP, COC, MET, MOR/OPI, THC	104050	8,39 €
<b>Drug-Screen-Multi 5TH</b>	AMP, BZO, COC, MOR/OPI, THC	104054	8,39 €
<b>Drug-Screen-Multi 5TA</b>	AMP, BUP, BZO, COC, MOR/OPI	104150	8,39 €
<b>Drug-Screen-Multi 5TB</b>	BZO, COC, MOR/OPI, MTD, THC	104151	8,39 €
<b>Drug-Screen-Multi 5TC</b>	AMP, BZO, COC, EDDP, MOR/OPI	104152	8,39 €
<b>Drug-Screen-Multi 6TA</b>	AMP, BZO, COC, MOR/OPI, MTD, THC	104060	9,99 €
<b>Drug-Screen-Multi 6TC</b>	AMP, COC, MDMA, MET, MOR/OPI, THC	104061	9,99 €
<b>Drug-Screen-Multi 6TD</b>	AMP, BZO, COC, MET, MOR/OPI, THC	104062	9,99 €
<b>Drug-Screen-Multi 6TE</b>	AMP, BZO, COC, EDDP, MOR/OPI, THC	104063	9,99 €
<b>Drug-Screen-Multi 7TA</b>	AMP, BUP, BZO, COC, MOR/OPI, MTD, THC	104070	11,69 €
<b>Drug-Screen-Multi 7TC</b>	AMP, BZO, COC, MET, MOR/OPI, MTD, THC	104072	11,69 €
<b>Drug-Screen-Multi 8TC</b>	AMP, BAR, BZO, COC, MET, MOR/OPI, MTD, THC	104082	13,39 €
<b>Drug-Screen-Multi 8TD</b>	AMP, BAR, BUP, COC, MDMA, MOR/OPI, MTD, THC	104084	13,39 €
<b>Drug-Screen-Multi 9TB</b>	AMP, BAR, BZO, COC, MDMA, MOR/OPI, MTD, TCA, THC	104091	14,99 €
<b>Drug-Screen-Multi 10TD</b>	AMP, BAR, BZO, COC, MDMA, MET, MOR/OPI, MTD, TCA, THC	104101	16,69 €
<b>Drug-Screen-Multi 10TA</b>	AMP, BAR, BUP, BZO, COC, MET, MOR/OPI, MTD, TCA, THC	104103	16,69 €
<b>Drug-Screen-Multi X</b>	Avec les paramètres de votre choix		Sans surcoût

## Aperçu des drogues et des médicaments

Paramètres	Nom populaire	Mode de consommation	Effet	Temps de détection	Prix	Cut-off
Amphétamine Méthamph. Ecstasy	Speed Crystal, Ice XTC, Adam	Oral, Amphétamine en intraveineuse	Euphorie, sentiment de bonheur, excitation	1 - 3 jours	<b>8-20,- EUR par comprimé d'Ecstasy</b>	300 à 1000 ng/ml
Barbituriques	Barbs, baibies, downers	Oral	<b>Diminution des facultés de jugement, torpeur, manque de motivation</b>	4 - 8 jours	<b>50 comprimés de Luminal® 13,25 EUR</b>	300 ng/ml
Buprénorphine	/	Oral	Pas d'effet de manque	2 - 6 jours	<b>1-2,- EUR 2mg / comprimé</b>	10 ng/ml
Benzodiazé- pines (ex Valium®)	Benzos, Rohpies, Dias, Rohyps	Oral	Pas de peur, calmant, relaxant	<b>2 - 3 jours, pour une consommation régulière plusieurs semaines</b>	<b>1-2,- EUR par comprimé</b>	300 ng/ml
Cannabis (THC)	Joint,Beuh, Pétard, Shit	Fumer, oral comme par exemple Space cake	Calme intérieur et Bien-être	<b>2 - 3 jours, pour une consommation régulière plusieurs semaines</b>	<b>4-12,- EUR par gramme</b>	25ng/ml ou 50 ng/ml
Cotinine	Clope, cigarette	Fumer	./.	2 - 3 jours	<b>5,20- EUR 20 cigarettes</b>	200 ng/ml
Fentanyl	Cina White	Pansement	Antalgique	10 - 17 heures	<b>2,50 EUR 8ng/ pansement</b>	10 ng/ml
Kétamine	Spécial K, Ket, Lady k, Kitty	Intraveineuse, nasal	Hallucinations	2 - 4 jours	<b>3,40 EUR 50 mg par ampoule</b>	1000 ng/lm
Cocaïne	Coco, neige, coc, black tar, Crack	Fumer, priser, oral, intraveineuse	Sentiment d'invincibilité, Euphorie	2 - 4 jours	<b>60-100,- EUR par gramme</b>	200 ng/ml 300 ng/ml
Méthadone	Po, Dollies	Oral	Pas d'effet de manque, pas d'extase	2 - 5 jours 2 - 7 jours	<b>par ex. 100 ml L-Polamidon® env. 33,- EUR</b>	300 ng/ml 100 ng/ml
EDDP -Métabolite de la méthadone						
Méthaqualone	Seven-one-fours, Seventeen, Lemmon 714	Oral	Aphrodisiaque	environ 14 jours	./.	300 ng/ml
Opiacés (ex. Héroïne)	Héro, poudre, Blanche	Intraveineuse, priser, fumer	Calmant, relaxant	2 - 3 jours	<b>25-100,- EUR par gramme</b>	300 ng/ml 2000 ng/ml
Oxycodon	./.	Oral	Antalgique	1 - 3 jours	<b>2,- EUR 20 mg /comprimé</b>	100 ng/ml
PCP	Poudre d'ange, Supergrass,	Nasal, oral	Troublant, rend agressif	2 - 3 jours	<b>Dose individuelle 8,- EUR</b>	25 ng/ml
Propoxyphène	Darvon	Oral	Antalgique, calmant	6 - 36 heures	<b>100 mg ca. 0,50 \$</b>	300 ng/lm
TCA	./.	Oral	Améliore l'humeur	2 - 3 jours	<b>50 comprimés Aponal® 20,47 EUR</b>	1000 ng/ml
Tramadol	./.	Oral	Antalgique, calmant	2 - 6 jours	<b>Tramadol 100ml 49,17EUR</b>	100 ng/ml

## Tests salivaires

- ✓ Utilisation facile
- ✓ Résultats après 10 minutes
- ✓ Diminution des problèmes de falsification
- ✓ Ne nécessite pas d'appareil électrique
- ✓ Haute sensibilité et spécificité
- ✓ Date de péremption: 12-18 Mois

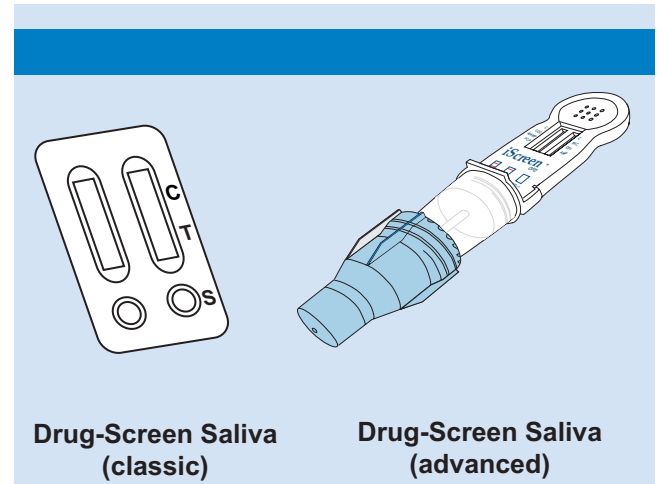

## Informations sur nos tests salivaires

Produit	Paramètre	Référence	Prix/Test HT
Drug-Screen Saliva-6 (classic)	COC, THC, MET, MTD, OPI, AMP	114051	19,99 €
Drug-Screen Saliva-6 (classic)	COC, THC, MET, OPI, AMP, PCP	114052	19,99 €
Drug-Screen Saliva-3 (classic)	COC, THC, AMP	114053	12,99 €
Drug-Screen Saliva-3 (classic)	COC, THC, MET	114054	12,99 €
Drug-Screen Saliva-6 (advanced)	COC, THC, MET, MTD, OPI, AMP	116061	22,99 €
Drug-Screen Saliva-6 (advanced)	COC, THC, MET, OPI, AMP, PCP	116062	22,99 €

## Temps de détection dans la salive

Substances	
Amphétamine	10 Min. à 72 heures
Cocaïne	10 Min. à 24 heures
Méthadone	jusqu'à 48 heures
Méthamphétamine	10 Min. à 72 heures
Morphine/Opiacés	
• forte dépendance de la dose	1 heure. à plusieurs jours
Phencyclidine	10 Min. à 24 heures
THC - consommation unique	jusqu'à 14 heures

## Temps limite de détection des drogues

Echantillons	Temps limite de détection
Traces invisibles (surfaces)	0,1 - 96 heures
Sang	0,1 - 10 heures
Urine	1 - 96 heures
Salive	0,1 - 24 heures
Sueur	0,5 - 12 heures


Les concentrations trouvées dans la salive correspondent à celles détectées dans le sang, sauf pour les benzodiazépines. Les résultats de ce test sont donc un bon indicateur permettant de savoir si le patient est actuellement sous l'emprise de la drogue.

## Seuils de détection (salive)

Produit	Paramètre	Substance active	
Amphétamine	AMP	d-Amphétamine	50 ng/ml
		MDA	150 ng/ml
Cannabis	THC	delta-9-THC	100 ng/ml
		11-nor-delta9-THC-9COOH	12 ng/ml
Cocaïne	COC	Cocaïne	20 ng/ml
		Benzoylécgonine	20 ng/ml
Méthamphétamine	MET	d-Méthamphétamine	50 ng/ml
		MDMA	50 ng/ml
Méthadone	MTD	Méthadone	30 ng/ml
Morphine/Opiacés	OPI	Héroïne	50 ng/ml
		Morphine	40 ng/ml
		6-Monoacetylmorphine	25 ng/ml
Phencyclidine	PCP	Phencyclidine	10 ng/ml

## Collecte de la salive


1. Sortir le collecteur de son emballage et le donner à la personne testée.
2. Introduire l'épongette dans la bouche. Appliquer l'épongette pendant trois minutes entre la joue interne et la langue, jusqu'à ce qu'elle soit imprégnée de salive.

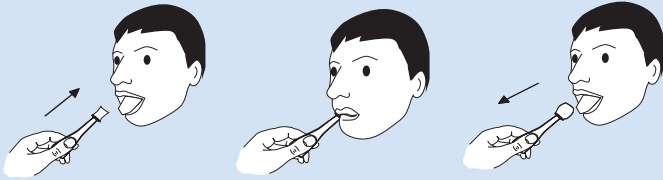

Test salivaire Drug-Screen (classic)




3. Exercer de légères pressions entre la langue et les dents pour faciliter l'absorption de la salive par l'éponge. L'épongette entièrement imprégnée ne devrait plus présenter de parties dures (totale imprégnation).
4. Suivre les indications ci-dessus suivant le type de test (classic ou advanced)

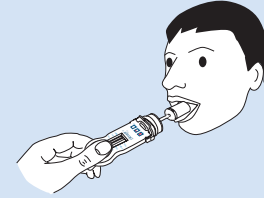

Test salivaire Drug-Screen (advanced)


## Exécution du test salivaire (classic)

1. Presser l'éponge contre la grille en plastique jusqu'à ce qu'il y ait le plus de salive possible dans le réservoir. Retirer le collecteur.

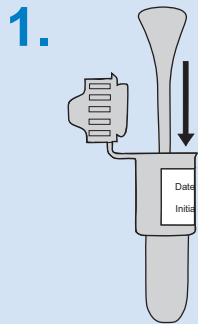

2. Refermer soigneusement le réservoir.


3. Déposer le test sur une surface propre et plate. Dévisser le couvercle du réservoir. Le retourner et déposer 3 gouttes de salive (env. 100 µl) dans chaque puits de la cassette.

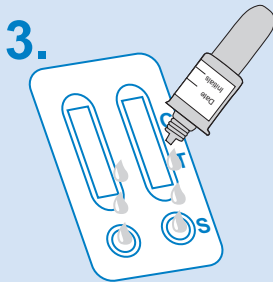

4. Attendre l'apparition des lignes colorées. Lire le résultat en l'espace de 10 minutes. Ne plus interpréter le résultat après 60 minutes.




5. Dans le cas d'un résultat équivoque, cacheter le réservoir avec l'étiquette argentée et l'envoyer à un laboratoire

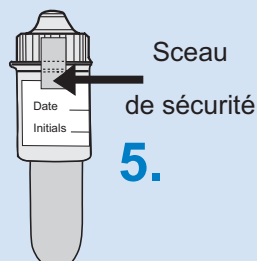


## Exécution du test salivaire (advanced)


1. Insérer verticalement le collecteur dans la capsule en s'assurant d'aligner la flèche rouge avec une des marques blanches de la capsule et presser fermement.

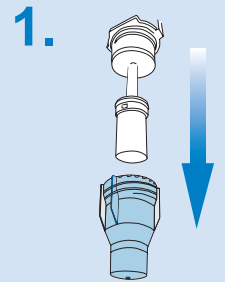

2. Tourner la capsule de 180° jusqu'à ce que la flèche rouge soit alignée avec l'autre marque blanche.

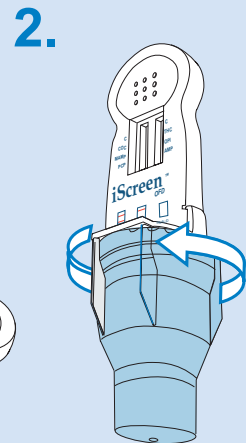

3. Placer le test horizontalement sur une surface plane et propre

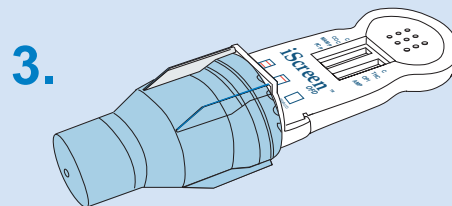

4. Interpréter les résultats après 10 minutes. Ne plus interpréter les résultats au bout d'une heure.



5. Si un résultat positif est constaté, bien refermer la capsule avec le sceau de sécurité et envoyer le test à un laboratoire spécialisé pour confirmation. Le laboratoire pourra avoir accès au réservoir grâce à l'embouchure prévue.

